


▣ 고지혈증 측정 방법

※ 주의 사항)공복 8시간후 측정하세요.



1. 채혈 전 **손 씻고 건조**
또는 **알콜솜**으로 채혈부위
소독 후 **건조**시키기

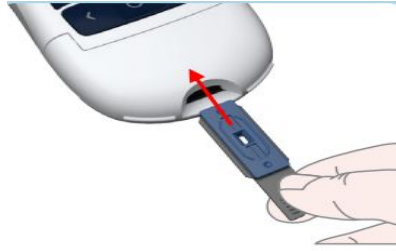

2. **전원버튼** 누른 뒤
대기화면에서 (**스트립**)
검사지 기기 삽입



3. 화살표방향으로
잡아당겨 뚜껑 열기



4. **새 채혈** 침 넣기



5. 채혈침 **보호캡**을
돌려서 **제거**



6. 뚜껑이 '딱'소리
나도록 닫기



7. 볼펜 누르듯 채혈기
뒷부분을 '**한번만**
누르기



* 채혈기의 버튼색이
노랑으로 바뀜을 확인!



8. 채혈침 깊이를 '**5**'로
선택




9. 손가락 대고 **노란 버튼**
누르기



10. 채혈
(스포이드 **검정선**까지
채혈 필요함. 다른 손을 사용하여
채혈 손가락 부근을 사진처럼하여
채혈해주세요)



11. 덮개 **열기**

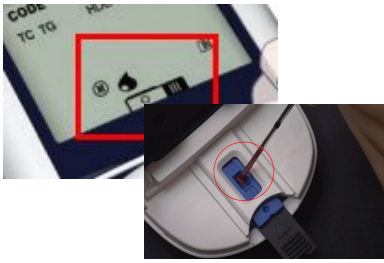

12. 화면에 **혈액방울**
깜빡일시 검사지에 채취
혈액 넣고 덮개 닫기



13. 카운트다운 3분 뒤 측정값
결과 확인 가능



14. 알콜솜으로 **지혈!**

※ 주의 사항)채취한 혈액은 기기에 한 번에
넣어주세요. 여러번 나누어 넣을시 오류남.
새 검사지 사용하여 새로운 혈액 채취 후
재측정할 것.

※ 주의 사항)카운트다운 동안
덮개 열지마세요



15. 채혈기 앞부분을 잡아
당겨 **채혈침** 제거



※ 사용한 바늘, 검사지는
의료폐기물통에 버리기

▣ 결과값



방향 버튼 누르면서
TC, TG, HDL 확인 후
결과기록지 종이에
기입하기

계측검사 결과기록지		성명: _____
		전화번호 뒷자리: _____
		검사일자: 2022년 ____월 ____일
		검사회차: 총 3회 중 () 회차

▶ 혈액검사 (혈당, 콜레스테롤)		
혈당	mg/dL	
TC(총콜레스테롤)	197	mg/dL
TG(중성지방)	143	mg/dL
HDL(고밀도지단백질)	71	mg/dL
LDL(저밀도지단백질)	97.4	mg/dL

본인의 계측결과기록지를 의료진과 연구진이 확인하는데 동의하십니까? ☐ 예 ☐ 아니요

검사자: (서명)

심터 관리자: (서명)

▣ 관리자용

1. 기기 확인 사항



측정지 1박스(측정지 25개) 기준으로 코드칩 교체해 주기
코드칩은 박스 마다 1개씩 동봉 돼 있습니다.

2. 측정시 주의사항


- 채혈: 스포이드 검정 선까지 충분히 혈액 채취할 것
- 혈액주입: 채취한 혈액은 기기에 삽입한 측정지에 한번에 주입할 것
- 만일 여러번 나누어 주입했을 경우 새 측정지를 가지고 재측정할 것

3. 기기관리

- 측정기 전원 꺼진 상태에서
아래쪽 사진 붉은 부분 분리->
센서부 내부를 씻은 면봉이나 천으로
가볍게 닦기->마른천으로 한번더 닦아
물기제거->완전 건조 후 센서부 가이드 측정기
끼우기



분리

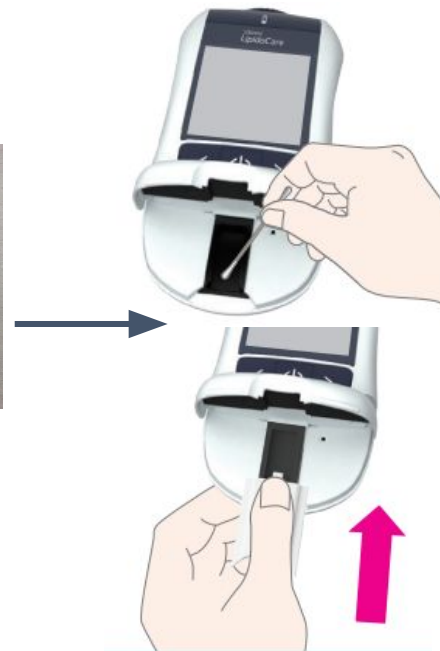

4. 보관

- 측정지 보관 온도: 2-32℃

4. 결과값

항 목	측정결과 범위(mg/dL)	측정결과 분류	
총 콜레스테롤 (Total Cholesterol)	<200	Desirable	적정
	200-239	Borderline high	경계
	≥240	High	높음
고밀도지단백질 (HDL)	<40	Low	낮음
	≥60	High	높음
	<150	Normal	적정
중성지방 (Triglycerides)	150-199	Borderline high	경계
	200-499	High	높음
	≥500	Very high	매우높음
저밀도지단백질 (LDL)	<100	Optimal	적정
	100-129	Near optimal/above optimal	정상
	130-159	Borderline high	경계
	160-189	High	높음
	≥190	Very high	매우높음

▣ 관리자용

5. 오류메시지 확인(매뉴얼 49p)



스트립 오류

삽입 (스트립)검사지 손상
또는 잘못 삽입 => 해당
메시지 반복시에는 새
검사지 교체하여 측정할




혈액량 부족 오류

=> 측정 중인 측정지에
혈액 추가 하지 말고,
반드시 새 검사지
교체하여 재측정할 것



온도오류

측정에 적합한 주변 온도
(18-32°C) 범위 밖의 환경일 때
나타나는 오류. 측정 적합
온도에서 재측정 실시하기

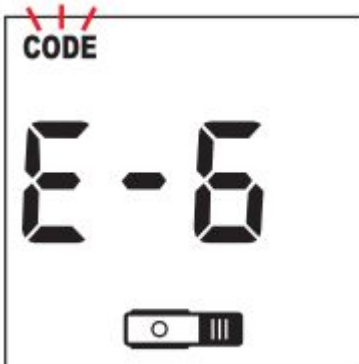

코드칩과 리피드 스트립 불일치

검사지 1박스(측정지25개)
기준으로 코드칩 교체해
주기



리피드 센서 덮개 열림 오류

=> 해당 오류시 기존
측정하던 측정지 폐기 후,
새검사지 사용하여
재측정할 것



혈액 미삽입 오류

=> 삽입된 검사지지를
기기로부터 분리 후,
재삽입하여 측정할 것



측정기 내부 오류 메시지

측정기 내부 오류로
전원을 껐다가 다시 켜기