

▣ 혈당 측정 방법

※ 주의 사항)공복 8시간후 측정하세요.



채혈 전 손 씻기!!




1. 검사지를 꺼내기

※ 뚜껑을 완전히 닫기



2. OK 누르기

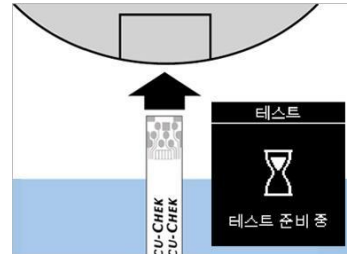

3. 금속부분부터 기계에 삽입

▣ 채혈 시작



1. 화살표방향으로
잡아당겨 뚜껑 열기



2. 새 **채혈** 침 넣기



3. 채혈침 보호캡을
돌려서 제거



4. 뚜껑이 '딱'소리
나도록 닫기



5. 볼펜 누르듯 채혈기
뒷부분을 '한번만
누르기



* 채혈기의 버튼색이
노랑으로 바뀔을 확인!



6. 채혈침 깊이를 '5'로 선택



7. 손가락 대고 **노란 버튼** 누르기



8. 알콜솜으로 채혈부위 **소독!**



9. 채혈



10. 검사지의 노란색 모서리에 혈액 방울을 묻힘



11. 알콜솜으로 **지혈!**



12. 채혈기 앞부분을 잡아 당겨 채혈침 제거



※ 사용한 바늘, 검사지는 의료폐기물통에 버리기



12. 결과 기록

계측검사 결과기록지		성명: _____
		전화번호 뒷자리: _____
		검사일자: 2022년 ____월 ____일
		검사회차: 총 3회 중 () 회차

▶ 혈액검사 (혈당, 콜레스테롤)

항목	결과	측정방법	단위
혈당	92 mg/dL	측정방법 검사	cm
TC(총콜레스테롤)	mg/dL	장	cm
TG(중성지방)	mg/dL	중	kg
HDL(고밀도지단백질)	mg/dL	지방률	%
LDL(저밀도지단백질)	mg/dL	량	kg
		지방	level
		둘레	cm

▶ 혈압검사

혈압	SYS	mmHg
	DIA	mmHg

▶ 검사기특확인 동의사항

본인의 계속검사기록을 의료인과 연구진이 확인하는데 동의하십니까? ☐ 예 ☐ 아니요